

## Desinfeksjon

Bruk klorfritt desinfeksjonsmiddel til å tørke og desinfisere varmenålen. Cavicide desinfeksjonsmiddel anbefales.

## Tørking

Etter rengjøring og desinfeksjon, vennligst tørk, det er anbefalt å bruk trykkluft til å tørke.

## Sterilisering

- 1.Steriliserbare deler: Pennespisser
- 2.Før sterilisering, bruk en steriliseringspose som oppfyller kravene i nasjonale forskrifter for emballasje.
- 3.steriliseringsmetode: dampsterilisering ved høye temperaturer
- 4.Steriliseringsforhold: 134°C i ikke mindre enn 5 minutter.

## Forklaring av garanti

Som produsent vil vi ta ansvar for defekte produkter forårsaket av material- og produksjonsprosessen, bare hvis det fortsatt er innenfor lårs-garantien. Garantien for hovedenheten til dette utstyret er for 12 måneder, batteri i 6 måneder.

Eventuelle skader som er forårsaket av den uautoriserte tredjepart, vil ikke ta noe ansvar for!

## Driftsmiljø og lagring, Transportforhold

### Driftsmiljø

Omgivelsestemperatur: +5°C-+40°C  
Relativhumiditet: 20%-80%  
Luftrykk: 860 hPa - 1060hPa

### Transport- og lagringsforhold

Omgivelsestemperatur: +5°C - +40°C  
Relativhumiditet: ≤93%  
Luftrykk: 860 hPa -1060hPa















## Teknisk parameter

- 1.Størrelsen på håndtaket: Lengde: 126mm Φ:19mm
- 2.Strømspenning: 230V / 50Hz eller 110V / 60HZ
- 3.Inngangseffekt:5 W
- 4.Beskyttelse mot elektrisk støt: TypeB

## Resirkulering og avhending

- Kast brukt utstyr i henhold til forskriftene og standardene i ditt land (region). Påse at alle komponenter ikke blir forurenset under avhending.

## Symboler

	Forsiktig		Klasse II-utstyr(Adapter)
	Loddrett		Se bruksanvisningen/heftet Type B-
	opp		utstyr
	Skjøre		Brukes kun innendørs
	Hold tørr!		Direkte
	Weee		CE-merket produkt
	Produsent av Serienummer		EuropeanUnionagent

## Foshan COXO Medical Instrument Co.,Ltd

Address: BLDG 4, District A, Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue, Nanhai District, Foshan, 528226 Guangdong, China  
E-mail:coxotec@163.com  
Http://www.coxotec.com




### Lotus NL B.V

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.  
Email:peter@lotusnl.com

## Gutta Cuts

## C-B Skuff

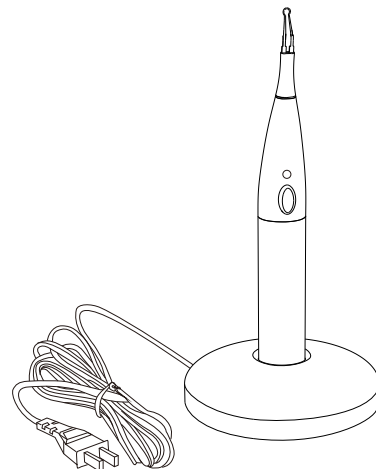

## Sikkerhets forsiktighet

**Advarsel: Les bruksanvisningen grundig før du bruker dette utstyret, dette vil lede deg til å bruke det riktig.**

- 1.Les bruksanvisningen nøye før du bruker dette utstyret.
- 2.Brukapparatet ihenhold tiltiltenktbruk.  
Produsentenpåtarseg ikke noeansvar hvis brukerenikke bruker i henhold til instruksjonene eller bruker apparatettil andreformål..
- 3.Når du bruker en ekstern strømforsyning,må du kontrollere at strømtilførsel er innenfor spenningsområdet som er angitt på enheten for å unngå skadepå operatoren eller pasienten.
- 4.Ikke berør pasientens lepper, tannkjøtt ellerslimhinner med bløtvev for å unngå skåldingtiloperatoren eller pasienten.Enheten må brukes utenforpasientens munn.
- 5.Ikke berør den oppvarmede varmenålen med brennbar gass eller væske, ellers kandetføre til brannfare.
- 6.Dette utstyret kan ikke brukes i miljøetmed flammablegas.
- 7.Ikke senk apparatet ned ivæske.
- 8.Hvis det er væskelekkasje fra utstyret, må du slutte å bruke det umiddelbart ogkontakte produsentenog autorisert forhandlerforavhending.
- 9.Hjertesykdom,gravidekvinnerogbarn børbenytte apparatet med varsomhet.
- 10.Dette utstyret er bare for profesjonelle brukere.

## Standard konfigurasjon

Guttacutterhåndtak	1
Laderbase	1
Pennetips(4stk)	1

## Tiltenkt bruk

Dette produktet er bare tilgjengelig for den godt trente tannlegen og tannlaboratoriet som er for kirurgi for å fylle rotkanal, som brukes til å kutte den ekstra gutta percha fra rotkanalen.

## Kontraindikasjoner

Bruk på personer implantert med pacemaker eller annet system er forbudt!

## Instruksjoner

Kontroller om spenningen på strømkilden stemmer overens med utstyret før lading.

### Lad opp

- 1.Først kobler du laderen til strøm tilførsel.
- 2.Sett enheten inn i ladebasen, når enheten er inne i ladesporet, vil lysindikatoren på håndtaket slås på.

### Beskrivelse av batteri

- 1.Før du bruker enheten for første gang, må du kontrollere at den er fulladet.
- 2.Ikke lad batteriet etter at det eroppbrukt.
- 3.For ålade enheten helt opp,bør ladetidenvære mer enn 12timer.

### Drift under arbeidet

- 1.Pennespissen på enheten, den buede delen fra toppen ermotgående til knappen, noe somgjør arbeidetenklere.
- 2.Pennespissene skal installeres på håndtaket under avkjølt tilstand(og knappen skal ikke betjenes under installasjonen), bruk den buede delen fra spissen til å kutte guttapercha.
- 3.Kontroller at pennespissen er godt installert før bruk.  
Rengjøring: Spissen er lett årengjøre etter noen sekundersvarme .

- 4.Når gutta percha er kuttet, slippknappen, vent til spissen avkjølesførdu tardenut fra pasienten.Betjeningsknappener "kontaktknapp", enheten slutter å fungere etter at du har sluppet knappen.

## Sikkerhetstiltak

- 1.Nårspissen fortsatterpåenheten, vennligstikke bøy den.
- 2.Hvis kraften er for sterk under behandlingen, ville det være dårlig for levetiden til pennespissen.
- 3.Elektromagnetisk bør unngås
- 4.Ikke modifier enheten på noenmåte.

## Rutinemessig vedlikehold

- 1.Spissnemå rengjøres, desinfiseres og steriliseres før og etter hver pasients bruk.
- 2.Hvis varmenålen ikke genererer varme, må du umiddelbart stoppe driften og kontrollere om varmespissen på varmenålen er defekt.Hvis det er en feil, må du bytte den ut med en ny varmenål itide.
- 3.Hvis ladeindikatoren ikke lyser, må dukontrollere om ladestativet er koblet til en strømkilde.
- 4.Feburnålen kan steriliseres 25 ganger ved høy temperatur og autoklav, hver gang steriliseres ved 134°C i ikke mindre enn 5minutter.

## Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering

### Rengjøring

- 1.Bruk en bomullspinne for å fjerne den gjenværende tanngelen fra varmen .
- 2.Legg de i enzyme bad i 5 minutter etterskylling.
- 3.Skyll med vann etter bløtlegging, og tork det deretter meden myk klut.